




Belmont (Schweiz), Häubi AG, Generalvertretung seit 1977
 Behandlungsstuhl



Behandlungsunits



Dentaleinrichtungen
 Praxismöblerungen
 Innenausbau, Innenarchitektur
 Häubi AG, Werkstrasse 29
 CH-3250 Lyss
 Tel. 032 385 17 24
 Fax 032 384 53 40
 e-mail: info@haeubilyss.ch
 url: www.haeubilyss.ch

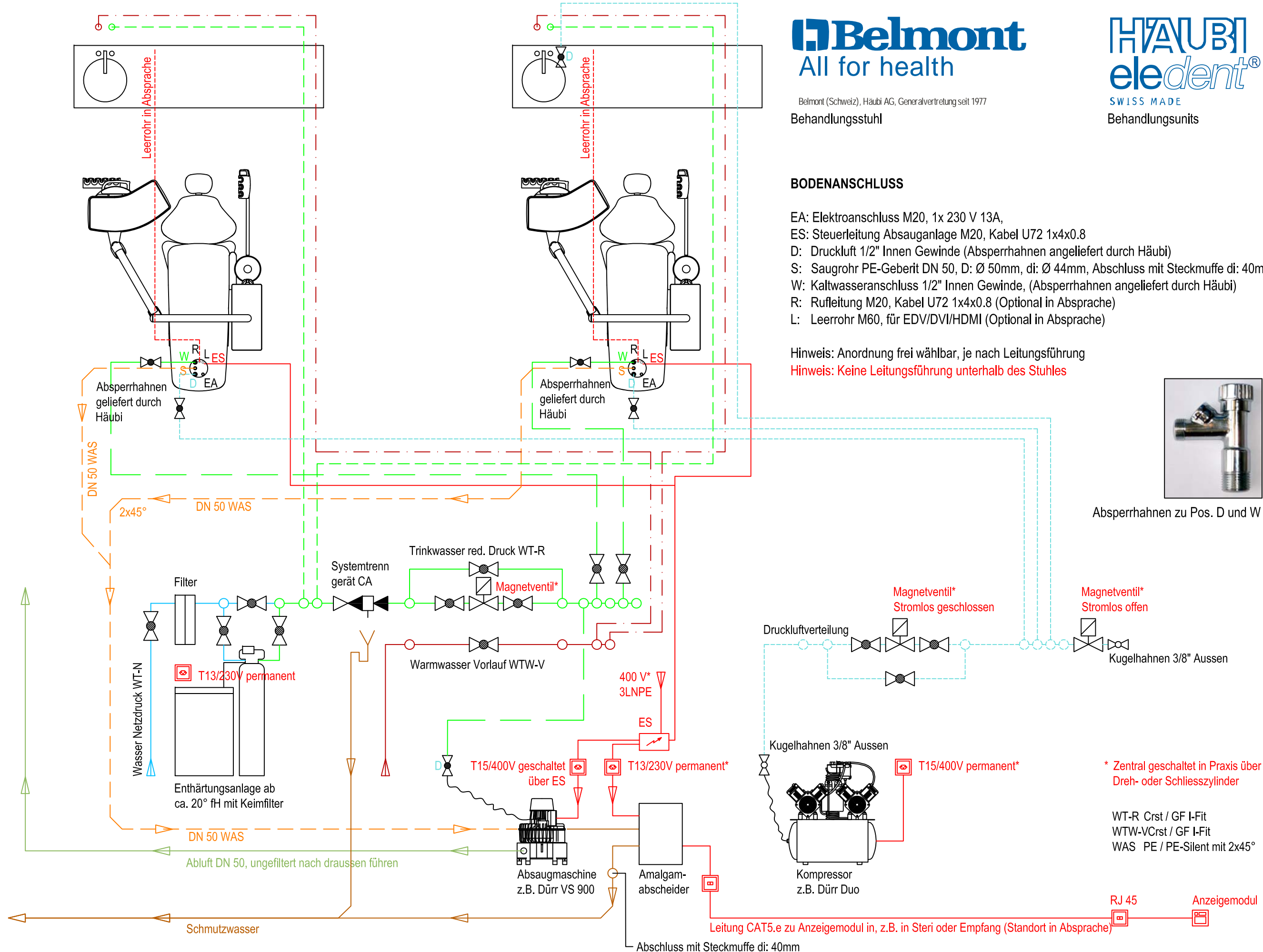

BODENANSCHLUSS

- EA: Elektroanschluss M20, 1x 230 V 13A,
- ES: Steuerleitung Absauganlage M20, Kabel U72 1x4x0.8
- D: Druckluft 1/2" Innen Gewinde (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- S: Saugrohr PE-Geberit DN 50, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, Abschluss mit Steckmuffe di: 40mm
- W: Kaltwasseranschluss 1/2" Innen Gewinde, (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- R: Rufleitung M20, Kabel U72 1x4x0.8 (Optional in Absprache)
- L: Leerrohr M60, für EDV/DVI/HDMI (Optional in Absprache)

Hinweis: Anordnung frei wählbar, je nach Leitungsführung
 Hinweis: Keine Leitungsführung unterhalb des Stuhles



Absperrhahnen zu Pos. D und W

Objektnummer	Produauftrag
--------------	--------------

Objektbezeichnung/Kunde

Mst:	
Erstellt:	23.03.2009
Gedruckt:	25.03.2009
Gr:	A3 (297 x 420 mm)
Gez:	---
PlanNr:	---01
Seite:	1/1

INSTALLATIONS SCHEMA

NASSABSAUGUNG

Sanitär - und Elektro Installationen

* Zentral geschaltet in Praxis über Dreh- oder Schliesszylinder

WT-R Crst / GF I-Fit
 WTW-VCrSt / GF I-Fit
 WAS PE / PE-Silent mit 2x45°

RJ 45 Anzeigemodul

Leitung CAT5.e zu Anzeigemodul in, z.B. in Steri oder Empfang (Standort in Absprache)

Abschluss mit Steckmuffe di: 40mm